

操作手册

【实验器材】

从左到右依次是读数显微镜、牛顿环、钠光灯、钠光灯电源（如图 1）

【操作流程】

1. 点击牛顿环，将牛顿环放置在显微镜镜筒下方。
2. 点击钠光灯电源、点击开关，打开钠光灯。
3. 点击反射镜、调整反射镜旋钮，将反射镜调整至 45° 。
4. 点击显微镜目镜进入目镜、标尺、数据记录界面（如图 2）。
5. 点击目镜窗口中的调整目镜按钮，使十字架丝清晰。
6. 点击标尺界面中的“居中”按钮，使十字架丝对准牛顿环。
7. 点击标尺界面中的“移动至左第 40 级”按钮向左移动 40 级，点击“向右移动 5 级”按钮向右移动 5 级并依次读数记录数据。



图 1

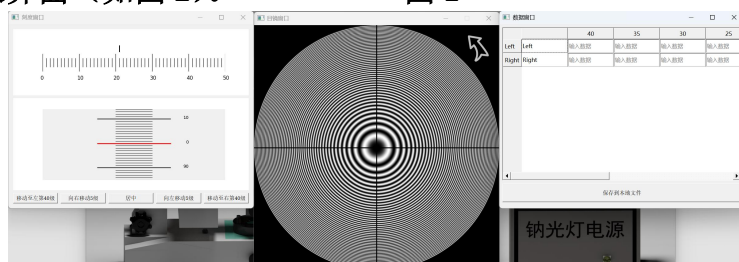


图 2

8. 点击“保存到本地”按钮将表格数据保存到本地。

【标尺使用方式】

在标尺界面中右上下两个标尺，分别是横向标尺与手轮标尺（如图 3）在横向标尺中每一格表示 1mm ，在手轮标尺中每一格代表 0.01mm ，将两个标尺数据相加即可得出当前数值。

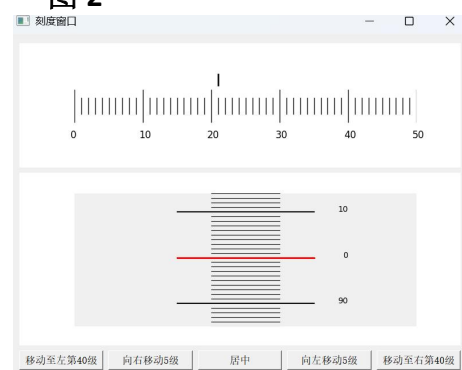


图 3